


STRAUMANN

EXACT™

Sự tương thích hoàn hảo

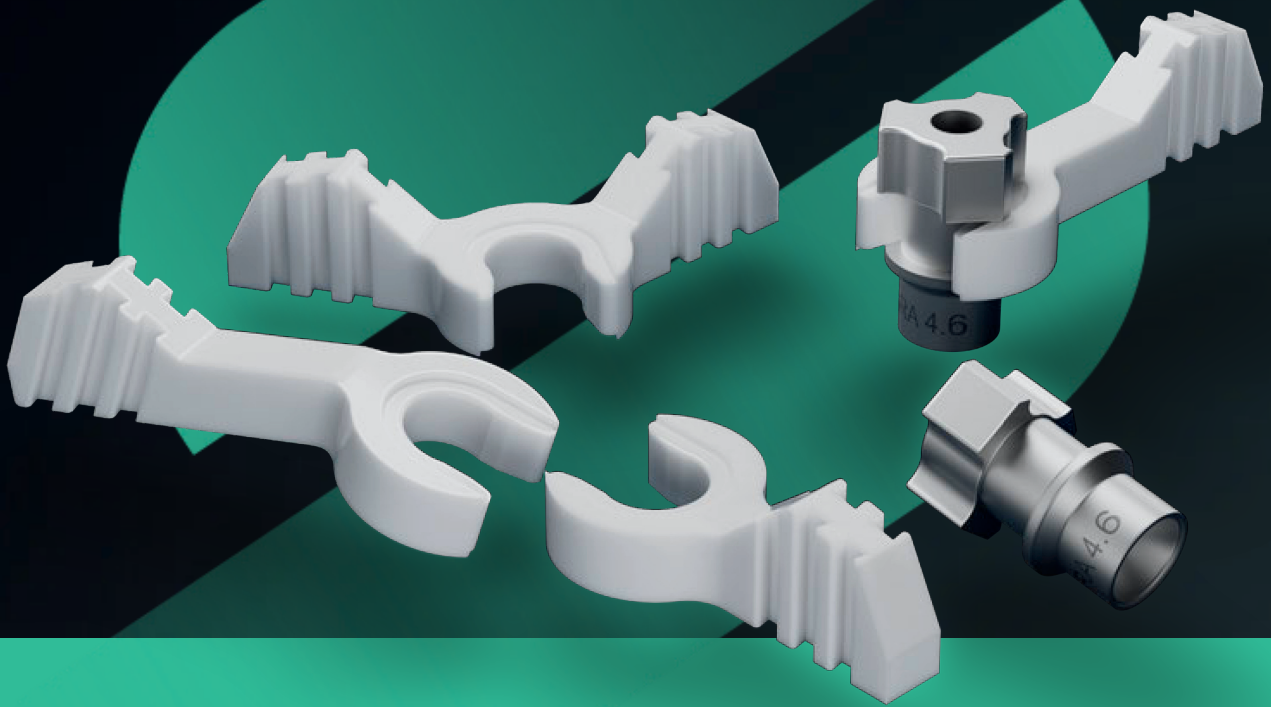


BƯỚC NGOẶT TRONG KỸ THUẬT SỐ NHA KHOA

KỸ THUẬT SỐ TOÀN HÀM - TỪ PHỤC HÌNH TẠM ĐẾN PHỤC HÌNH SAU CÙNG

Mục tiêu của chúng tôi là gia tăng hiệu quả và độ chính xác nhằm rút ngắn thời gian hoàn tất case, đồng thời giảm thiểu chi phí đầu tư trang thiết bị cần thiết để điều trị các case phục hình cố định toàn hàm.

Được tích hợp mượt mà với Straumann SIRIOS™ và Straumann AXS™, cũng như được tương thích hoàn toàn với Straumann UNIQ™, hệ thống Straumann EXACT™ nâng cao độ chính xác, hiệu quả và tính linh hoạt cho các bác sĩ lâm sàng cũng như labo, giúp các quy trình phục hình toàn hàm kỹ thuật số dễ tiếp cận hơn mà không đòi hỏi chi phí đầu tư lớn cho công nghệ quang trắc lập thể.

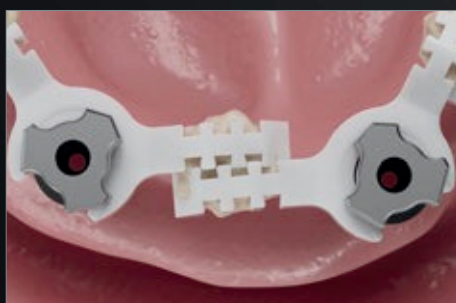

Hình 1: Đầu tiên, scanbody BASEs Straumann EXACT™ được bắt vít vào trụ abutment multi Straumann - SRAs. Sau đó, lựa chọn LINKS phù hợp để khít sát tốt nhất với các vị trí của abutment và các cấu trúc giải phẫu. Quá trình này tạo ra một cầu quét vững ổn, cho phép lấy dấu chính xác vị trí của abutment.

Không cần chế tác khóa jig kiểm tra hoặc gửi mẫu hàm vật lý





TỐC ĐỘ

Loại bỏ nhu cầu thực hiện các công đoạn tốn nhiều công sức như chế tác khóa jig kiểm tra và đổ mẫu hàm, cho phép thực hiện quy trình hoàn toàn kỹ thuật số từ phục hình tạm đến phục hình sau cùng



ĐỘ CHÍNH XÁC

Các liên kết vật lý giữa các scanbody cải thiện đáng kể độ chính xác của máy quét trong miệng và nâng cao sự chuẩn xác khi quét toàn hàm, vượt qua những hạn chế của các scanbody truyền thống



TỐI ƯU CHI PHÍ

Cung cấp một giải pháp thay thế có độ chính xác cao thay cho các hệ thống đo quang trắc mà không đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu quá lớn




TÍNH LINH HOẠT

Sự tương thích với Straumann UNIQ™ và hỗ trợ quá trình làm việc với các đối tác labo, trao quyền cho các bác sĩ lâm sàng khả năng kiểm soát tốt hơn và tự do lựa chọn


Straumann EXACT™ mang đến một quy trình điều trị toàn diện bằng kỹ thuật số liền mạch, tiết kiệm chi phí, chính xác và đã được kiểm nghiệm dành cho các phục hình toàn hàm.

Các scanbody truyền thống thường không đủ chính xác do thiếu các điểm mốc để phần mềm có thể khớp dữ liệu một cách chuẩn xác. Bằng cách kết hợp 'BASE' scanbody với 'LINKS', hệ thống cho phép quét dấu trên bệnh nhân mất răng một cách chính xác và tiết kiệm, đồng thời loại bỏ được các bước truyền thống.

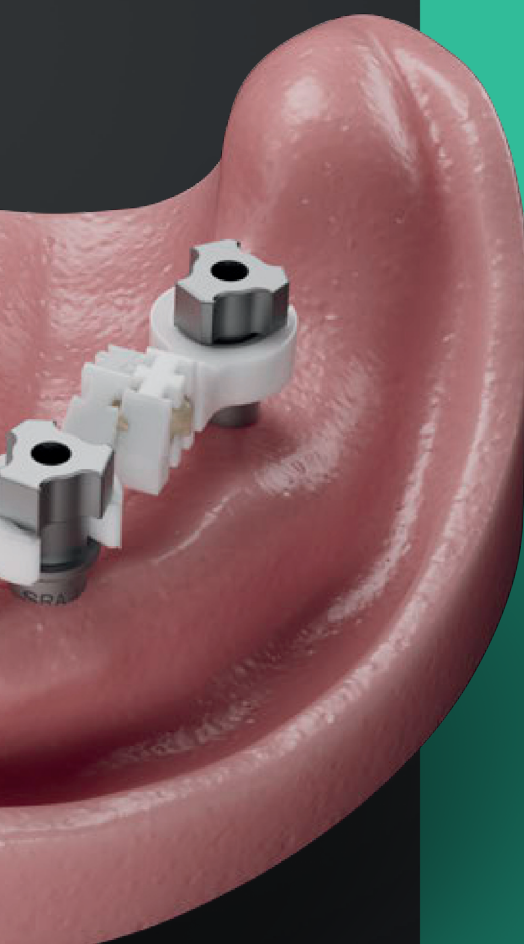

ĐƯỢC PHÁT TRIỂN CHÚ TRỌNG VÀO ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ TÍNH TIỆN DỤNG

Straumann EXACT™ là thành quả của quá trình nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, đánh giá trên hơn 50 nguyên mẫu thử nghiệm, thông qua hơn 1.000 lượt quét dấu nhằm tối ưu hóa độ chính xác và tính tiện dụng.

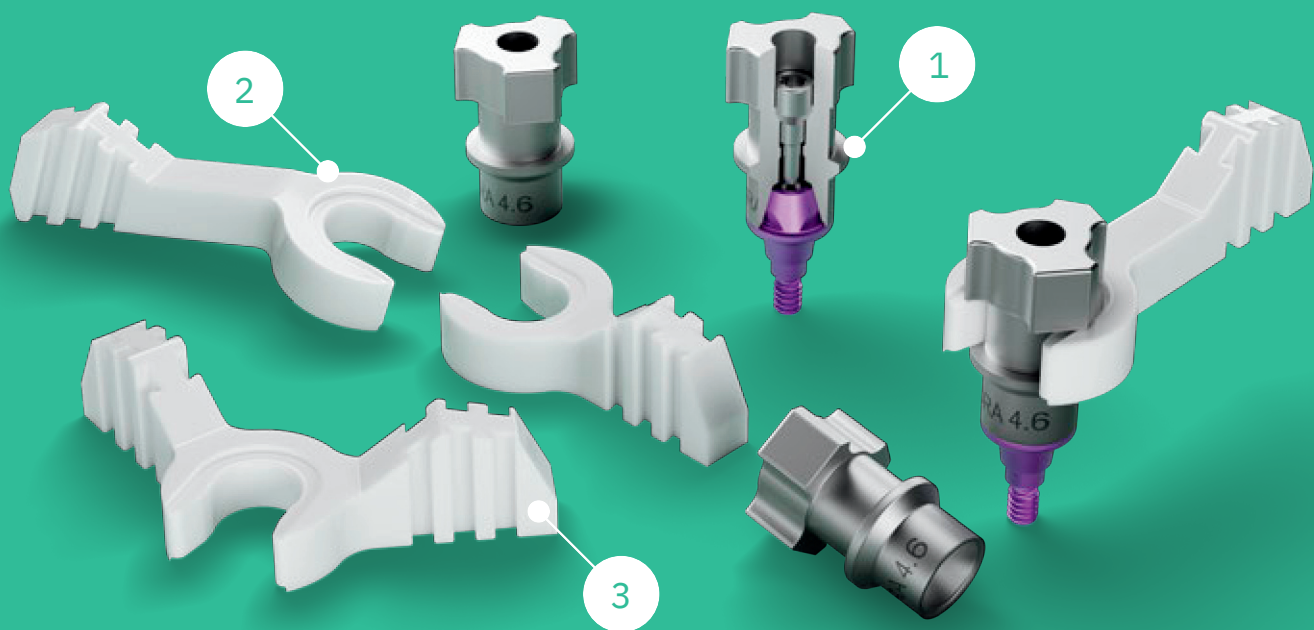

Tên sản phẩm		Mã sản phẩm	Mô tả
Scanbody /BASE		025.0084	for Straumann® SRA 4.6
LINKS		025.0086V4	Long LINK
		025.0087V4	Short LINK
		025.0088V4	V-Shape LINK
		025.0089V4	Angled LINK

1 THIẾT KẾ HƯỚNG TỚI ĐỘ CHÍNH XÁC

Hình dạng BASE không đối xứng, không đồng dạng giúp cải thiện độ chính xác khi quét, đồng thời việc gắn trực tiếp lên abutment bắt vít đảm bảo hạn chế dung sai và mang lại kết quả đáng tin cậy. Các rãnh định vị sẵn giúp giảm thiểu sự dịch chuyển theo chiều dọc, góp phần hạn chế tình trạng biến dạng dữ liệu quét và duy trì độ chính xác.

2 DỄ SỬ DỤNG

Thiết kế gắn trực tiếp theo kiểu snap-on đơn giản mang lại cảm giác tay tốt và dễ quan sát, giúp đảm bảo các liên kết luôn được định vị chắc chắn trong mỗi lần sử dụng.

3 ỨNG DỤNG LÂM SÀNG ĐA DẠNG

- **Ghi dấu mô mềm** đồng thời giúp tinh gọn quy trình làm việc, giảm thiểu bước quét mô mềm bổ sung.
- **Hình dạng LINK chuyên biệt** được thiết kế để làm việc hiệu quả trong các ca hàm dưới, tránh bị lưỡi cản trở.
- **Các LINK có thể xoay** cho phép các vị trí dán dính chính xác phù hợp với từng ca.
- **Bốn hình dạng LINK** đáp ứng một loạt các tình huống lâm sàng, bao gồm các ca mất răng toàn hàm.



RÚT NGẮN CON ĐƯỜNG ĐẠT ĐẾN PHỤC HÌNH KHÍT SÁT THỰC ĐỘNG

SCAN



KHAI THÁC TOÀN BỘ TIỀM NĂNG CỦA MÁY QUÉT TRONG MIỆNG

Bệnh nhân ngày càng kỳ vọng vào một trải nghiệm kỹ thuật số liền mạch và được nâng tầm. Họ tin rằng việc nha sĩ sử dụng công nghệ kỹ thuật số là điều quan trọng và ưu tiên lấy dấu kỹ thuật số hơn các phương pháp truyền thống nhằm mang lại sự thoải mái và tiện lợi cao hơn.

Hệ thống scanbody, Straumann EXACT™ cho phép bác sĩ sử dụng máy quét trong miệng hiện có cho các ca phục hình toàn hàm, giúp tinh gọn quy trình làm việc và nâng cao năng lực điều trị.

Nâng cao trải nghiệm người dùng vượt trội hơn nữa với máy quét Straumann SIRIOS™ của chúng tôi. Với một quy trình làm việc chuyên biệt và đã được kiểm nghiệm, hệ thống này mang lại các phục hình Implant toàn hàm có độ chính xác cao - tất cả chỉ trong một ca quét duy nhất.

MATCH



CHIA SẺ LIỀN MẠCH CÁC DỮ LIỆU QUÉT CHÍNH XÁC VỚI ĐỐI TÁC LABO ƯU TIÊN CỦA BÁC SĨ

Gửi các dữ liệu quét Straumann EXACT™ của bác sĩ đến đối tác labo mà bác sĩ lựa chọn, cho phép bác sĩ tự do lựa đối tác đáng tin cậy để thực hiện các phục hình sau cùng.

Với Straumann EXACT™, bác sĩ có thể tin tưởng vào độ chính xác: Đạt được độ chính xác trung bình 22 µm, hoàn toàn nằm trong ngưỡng yêu cầu 50 µm để phục hình khít sát thực động.

GIẢM THỜI GIAN TRÊN GHẾ VÀ SỐ LẦN HẸN, ĐẨY NHANH THỜI GIAN HOÀN THIỆN PHỤC HÌNH





Khám phá
Straumann AXS™

DESIGN



STRAUMANN UN!Q™

Straumann UN!Q™ cung cấp những gợi ý thiết kế toàn diện, mang lại cho các labo một khởi đầu thuận lợi trong quy trình làm việc. Quan trọng là, các labo luôn giữ quyền kiểm soát và phê duyệt thiết kế sau cùng, nhằm đảm bảo mọi chi tiết đều đáp ứng các tiêu chuẩn của lab.

Bằng cách chuyển giao việc gia công thanh bar cho UN!Q, các labo sẽ tiết kiệm được thời gian và nguồn lực quý giá. Với sự linh hoạt trong việc phay vật liệu Zirconia và thực hiện các bước hoàn thiện cuối cùng ở labo in-house, các labo có thể mang đến những phục hình cao cấp, mang tính cá nhân hóa đáp ứng nhu cầu của cả bác sĩ và bệnh nhân.

RESTORE



STRAUMANN® COREBAR™

Các phục hình Straumann® CoreBar™:

Sự giao thoa giữa độ chính xác và sự thoải mái

→ **Sự thoải mái cho bệnh nhân:** nhẹ hơn so với phục hình zirconia nguyên khối, mang lại trải nghiệm tốt hơn

→ **Dán dính đáng tin cậy:** diện tích bề mặt lớn hơn giúp giảm thiểu nguy cơ bong sút

→ **Tăng cường khả năng nâng đỡ:** phân bố lực vượt trội so với các coping truyền thống

→ **Tối ưu hóa hiệu suất:** phay Zirconia tại labo trong khi thanh bar được gia công tập trung bởi Straumann UN!Q™ bằng cách sử dụng tệp dữ liệu lõi

→ **Sẵn sàng cho quy trình kỹ thuật số:** không cần đến mẫu hàm vật lý

KHÔNG CÒN CẦN LẦN HẸN KIỂM TRA DẤU VÀ MẪU HÀM

"Sử dụng dịch vụ của các bạn mang lại cảm giác rất nhẹ nhàng, quy trình diễn ra vô cùng nhanh chóng và đơn giản. Tôi rất thích quá trình kiểm soát thiết kế và chất lượng thiết kế thực sự tuyệt vời."

YDL Dental, Texas

Straumann EXACT™

STRAUMANN EXACT™

SỰ TƯƠNG THÍCH HOÀN HẢO




Khám phá
Straumann EXACT™

→ **Tốc độ:** loại bỏ nhu cầu thực hiện các công đoạn tốn nhiều công sức như chế tác khóa jig kiểm tra và đổ mẫu hàm, cho phép thực hiện một quy trình hoàn toàn bằng kỹ thuật số từ đầu đến cuối

→ **Độ chính xác:** các liên kết vật lý giữa các scanbody cải thiện đáng kể, độ chính xác của máy quét trong miệng và nâng cao sự chuẩn xác khi quét dấu toàn hàm

→ **Tối ưu chi phí:** cung cấp một giải pháp có độ chính xác cao thay thế cho các hệ thống đo quang trắc mà không đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu quá lớn

→ **Tính linh hoạt:** tương thích với Straumann UN!Q™ và hỗ trợ quá trình hợp tác với đối tác labo ưu tiên, trao quyền cho các bác sĩ sự tự do trong việc lựa chọn

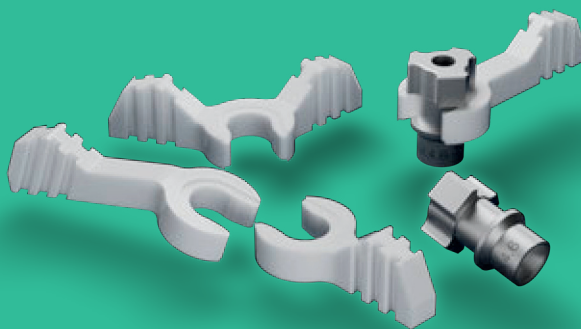

491.012/en/A/00 03/25



Trụ sở chính - TP.HCM:

Tầng 7, Toà nhà Charmington La Pointe, 181 Cao Thắng nối dài,
Phường Hoà Hưng, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0949967909 (Mr. Thiện)

Văn phòng Hà Nội:

Tầng 12A - Toà nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu,
Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
ĐT: 0349 586 838 (Mr. Hùng)

Văn phòng Đà Nẵng:

30 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoà Cường, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0934 950 203 (Mr. Chiến)

